

Призначення

Для створення зліпків:


- об'ємних відтисків слідів рук на еластичних поверхнях;
- слідів укусів (зубів);
- слідів інструментів зламу;
- донної частини гільз;
- для вилучення слідів рук, що виявлені дактилоскопічними порошками на поверхнях різної рельєфності.

Комплектація набору:

1. **Паста** в шприц-тубі, 10 мл – 1 шт.
2. **Компонент 1** каталізатора в шприці – 1 шт.
3. **Компонент 2** каталізатора в пробірці – 1 шт.
4. Порошок дактилоскопічний немагнітний чорний в пробірці – 1 шт.
5. Шпатель дерев'яний – 1 шт.
6. Чашка полімерна, 150 мл - 1 шт.
7. Етикетка для маркування – 1 шт.
8. Рукавички нітрилові – 1 пара
9. Інструкція

Приготування Компаунду

1. **Пасту** помістити в чашку.

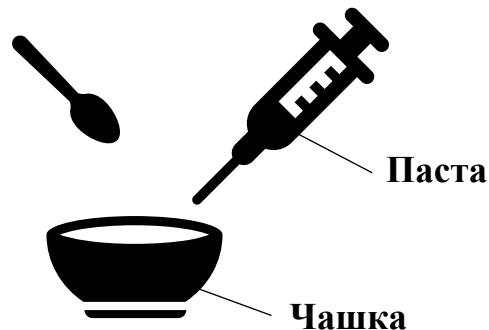


Додати дактилоскопічний порошок, в кількості, необхідній для отримання бажаної інтенсивності забарвлення Компаунду, та ретельно змішати шпателем до однорідної маси.

2. Для отримання **Каталізатора** додати **Компонент 1** зі шприца в пробірку з **Компонентом 2**.



Пробірку щільно закрити та ретельно перемішати шляхом інтенсивного струшування.

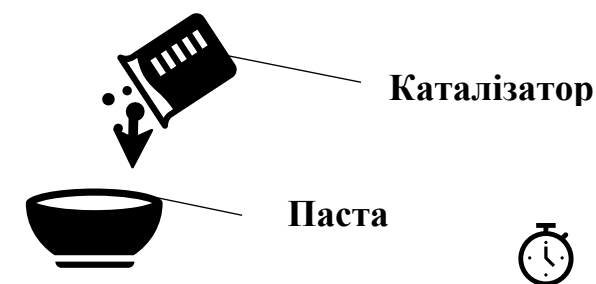


Компаунд готовий до використання.


Не перемішувати суміш різкими рухами для запобігання утворенню пухирців повітря, які можуть деформувати зображення сліду!

Отримання зліпків

1. Нанести Компаунд шпателем на слід рівномірним шаром товщиною від 3-5 мм.

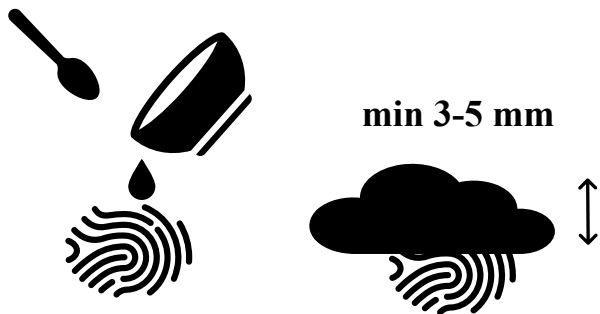

2. Помістити у зліпок кінці дроту або нитки з полімерною етикеткою для подальшого маркування.

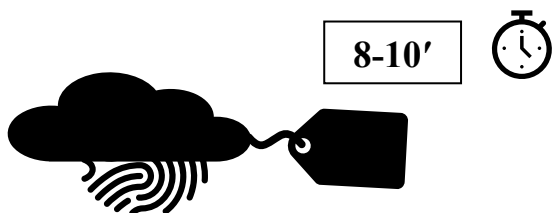

3. Час повного застигання при збереженні пропорцій, температури повітря +18⁰ С та відносної вологості 61 %, складає 8-10 хвилин.

Для зменшення часу затвердіння при зниженні температури та/ або вологості допускається незначне зменшення дози пасти.

При високій температурі та/або вологості, а також для збільшені терміну

застигання суміші, допускається незначне зменшення дози каталізатора.



4. Після застигання зняти зліпок з поверхні плавним повільним рухом.

УВАГА!!! Компоненти Компаунду є хімічно активними речовинами. Працювати в гумових рукавичках! При потраплянні даних речовин в очі, слід негайно промити їх великою кількістю проточної води та звернутись до лікаря.

Виготовлено на замовлення
ТОВ «НВК «ЕКСПЕРТ»

вул. Гарматна, 20, офіс 42,
м. Київ, 03067, Україна

office: +38 (044) 383 48 17
mob: +38 (067) 367 98 89

biz@pro-expert.com.ua

www.pro-expert.com.ua

EXPERT
www.pro-expert.com.ua

НАБІР ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОБ'ЄМНИХ ЗЛІПКІВ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

